


* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.



3. 모드별 사용방법


자동모드 (모드시간: 약 36분 30초)

자동모드는 별도의 조작 없이 제품의 하중인식, 압박자극, 온열자극, 세라젬사운드 기능이 실행되어 사용할 수 있습니다.

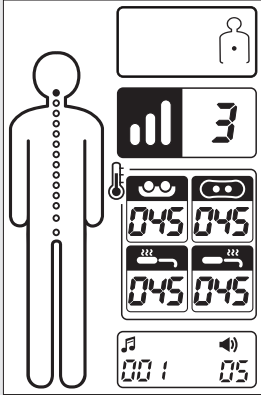


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.

- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

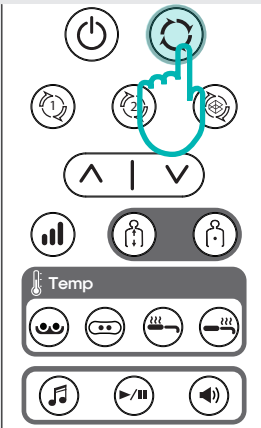


2. 자동모드키를 2번 누르면(수동모드일 경우 1번 누르면) 세라젬 사운드가 재생되고, 부저음과 함께 하중인식이 시작되오니 올바른 자세로 누워주세요.

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

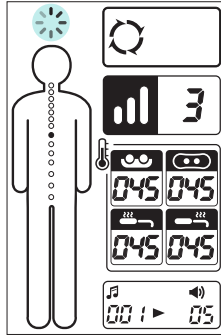

3. 하중인식이 끝나면 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 복부 모드시 부저음이 울립니다. 복부압박자극 자세를 취해주시기 바랍니다.
- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 복부 모드는 사용자가 옆드린 자세를 취하여 복부의 압박 자극 및 온열자극이 이루어 지도록 합니다.

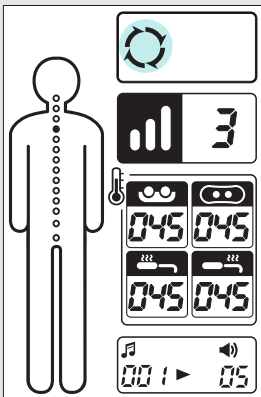


* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 1~9 (모드시간: 약 36분 30초, 모드2: 약18분)

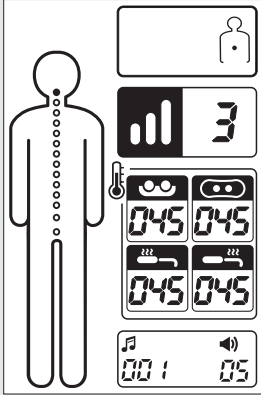


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.

- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

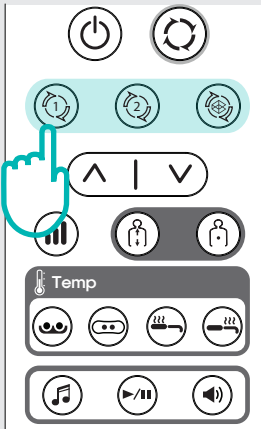


2. 모드 1, 2, 3~9키를 2번 누르면(수동모드일 경우 1번 누르면) 세라젼 사운드가 재생되고 부저음과 함께 하중인식이 시작 되오니 올바른 자세로 누워주세요.

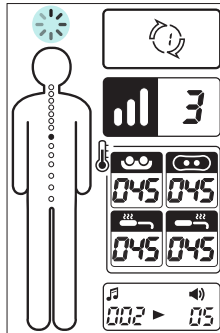

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

	2번 누름(모드1선택)
	2번 누름(모드2선택)
	연속 누름(모드3~9 순차적 선택)

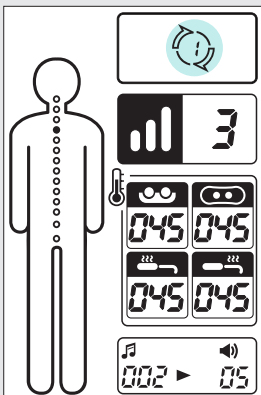

3. 하중인식이 끝나면 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.


모드 1	모드 2 (18분)	모드 3	모드 4	모드 5	모드 6	모드 7	모드 8	모드 9

* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

반자동모드 (모드시간: 약 18분)

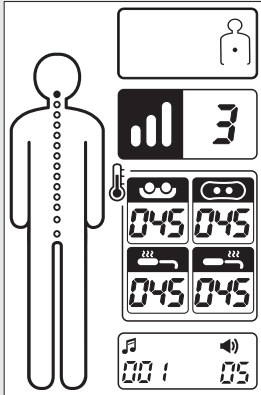


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.


- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

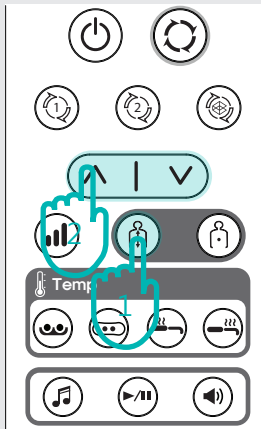

2. 반자동모드키를 2번 누른 뒤(수동모드일 경우 1번 누른 뒤) 원하는 지점으로 내부도자를 이동시키세요.

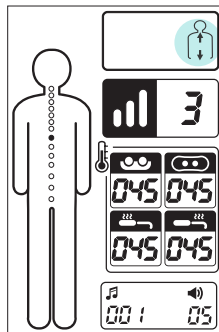

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

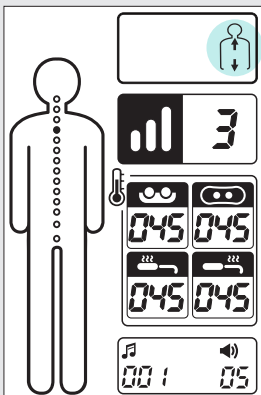


3. 지정하신 위치를 기준으로 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.

* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.


3. 모드별 사용방법

수동모드 (모드시간: 약 60분)

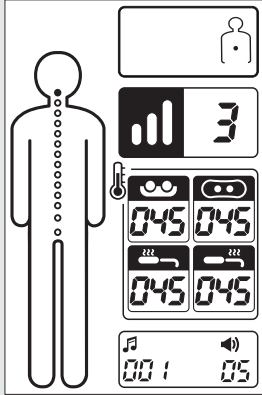


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.


- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

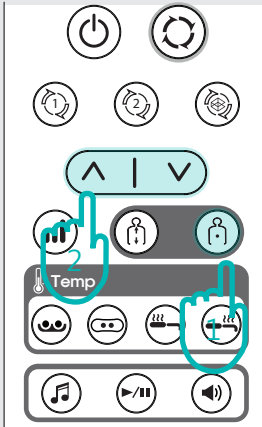

2. 수동모드키를 2번 누른 뒤 원하는 지점으로 내부도자를 이동시키세요.

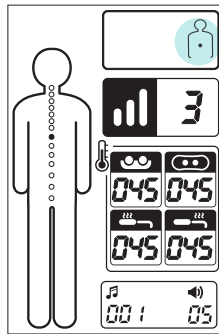

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

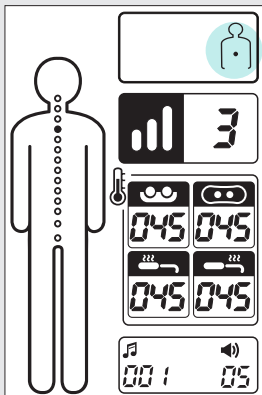

3. 지정하신 위치에서 온열자극이 시작되오니 올바른 자세를 유지해 주세요.

- 리모콘 조작 후 5분이 경과하면 화상방지를 위해 내부도자가 자동으로 이동합니다.
- 리모콘 조작 후 60분이 지나면 자동으로 리모콘이 꺼지며 모드가 종료 됩니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)

자동모드


(모드시간: 약 36분 30초)

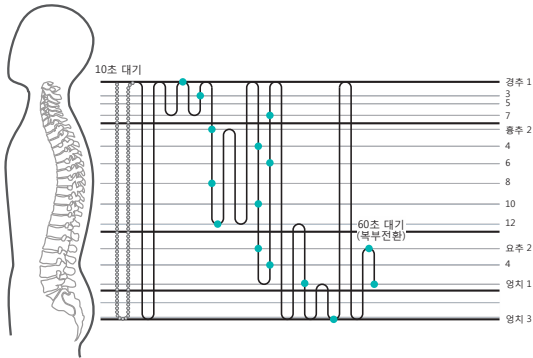

모드 1


(모드시간: 약 36분 30초)

● 온열자극(100초)

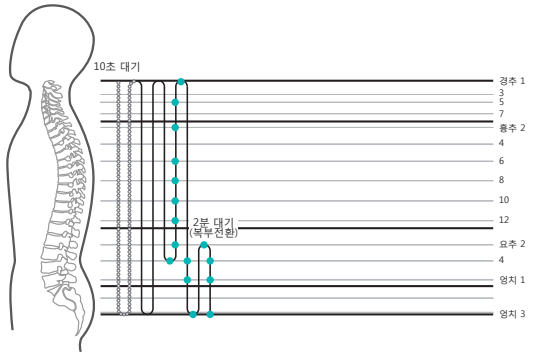


모드 2

(모드시간: 약 18분)

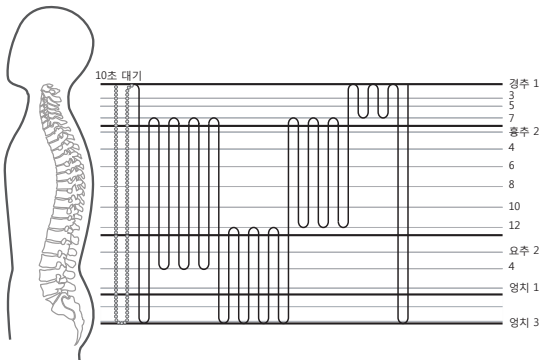

모드 3

(모드시간: 약 36분 30초)

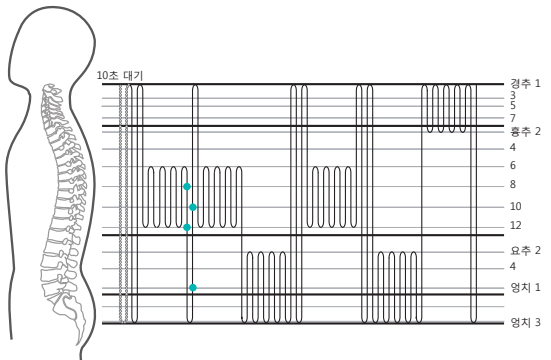

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)


모드 4

(모드시간: 약 36분 30초)

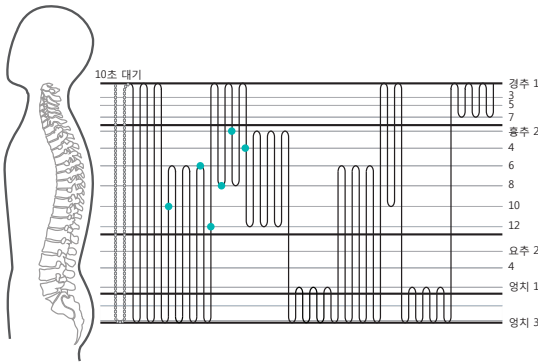


모드 5

(모드시간: 약 36분 30초)

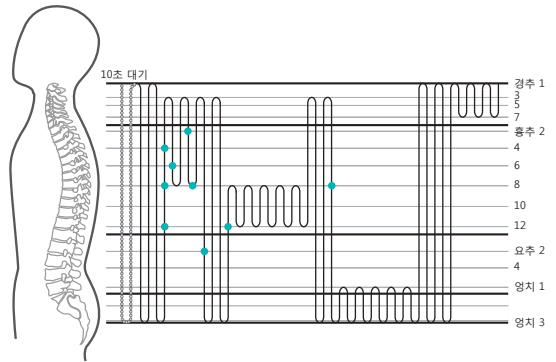


모드 6

(모드시간: 약 36분 30초)

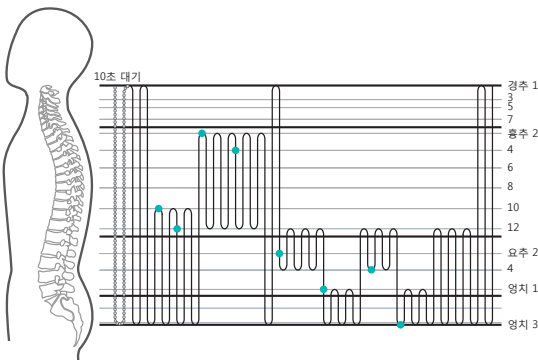

모드 7

(모드시간: 약 36분 30초)

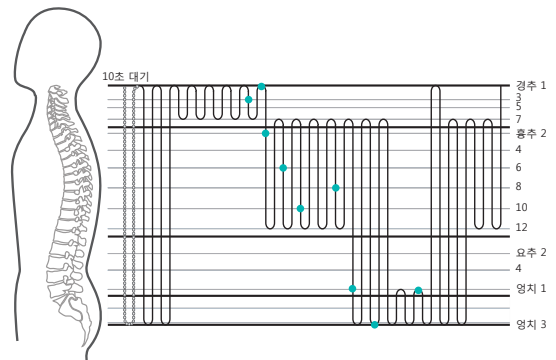

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)


모드 8

(모드시간: 약 36분 30초)

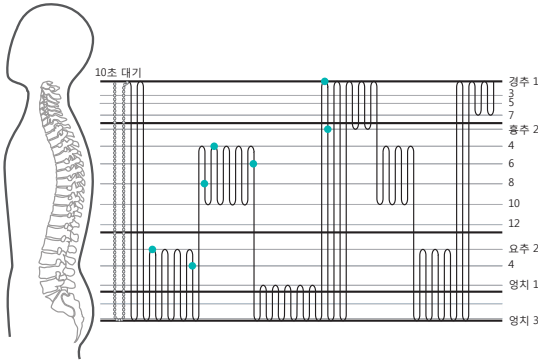

모드 9


(모드시간: 약 36분 30초)

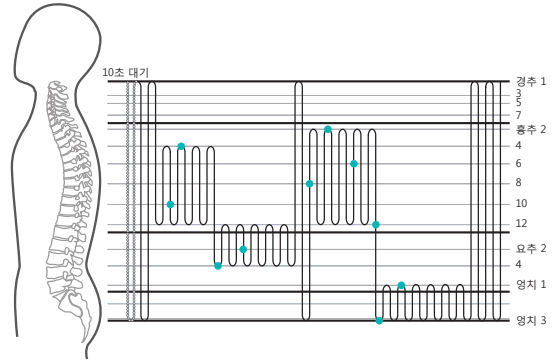


반자동 모드

(모드시간: 약 18분)

내부도자 최종위치를 기준으로 일정 구간에서 반복 마사지

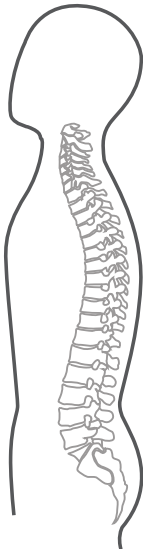

● 상하이동(3회) + 온열자극(60초)

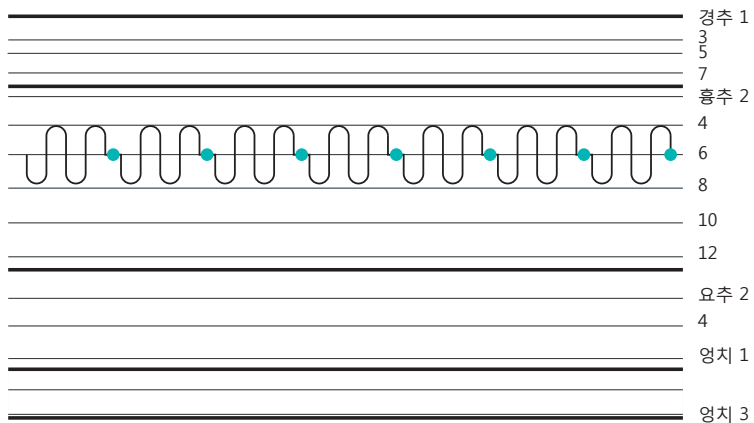

※ 사용자가 위치를 조절하여 사용할 수 있습니다.