




4. 제품 이동방법

1

본체에서 전원코드, 리모콘, 외부도자를 분리한 후 헤드쿠션을 올리고 보조매트를 들어올리며 닫으세요. (보조매트를 열 때는 반대로 보조매트를 앞으로 당긴 후 위로 들어올리며 내려주세요.)

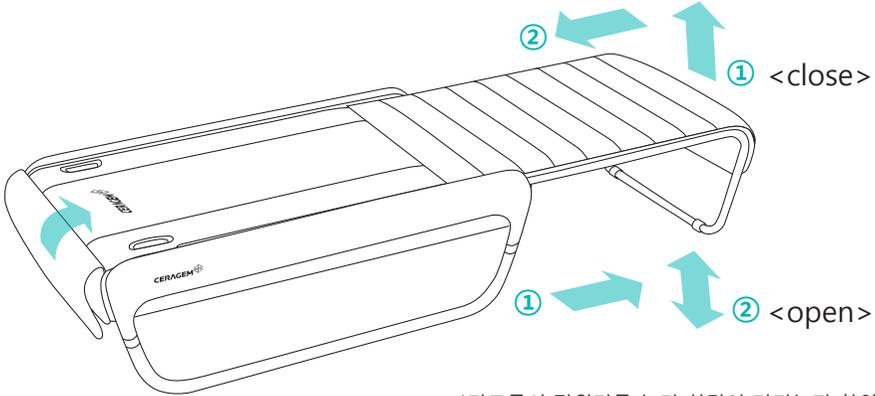

*리모콘의 전원키를 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요.




주의

이동 시 리모콘의 전원을 끈 후 본체 전원을 꺼주세요.
(리모콘 전원을 끈 후 약 10초 뒤 보조 프레임을 닫아주시기 바랍니다.)

2

두 사람이 함께 양쪽 본체 하단프레임을 잡고 수평으로 들어 이동하세요.

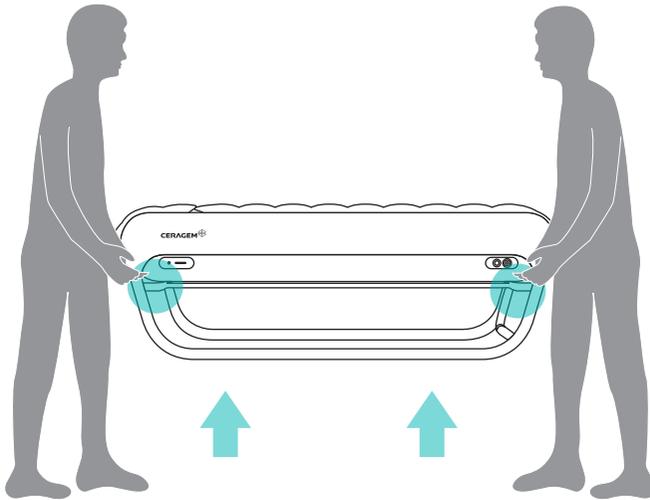

주의

제품을 들어올릴 때 허리를 펴고 무릎을 구부린 상태에서 천천히 들어 올리세요.