



사용설명서

CGM MB-1101








중요안전사항

신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험이나 지식이 부족한 사람들은 그들의 안전에 책임을 지는 보호자의 감독 하에 이 제품을 사용해야 합니다. 어린 아이들이 이 제품을 가지고 장난하지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다.

이하의 내용은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 것입니다. 사용자께서는 사용 전에 반드시 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다. 중요안전사항은 "위험" 및 "경고"와 "주의"의 세 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다. 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

 위험	표기사항 위반 시 심각한 상해나 사망 가능성이 있으며 그 긴급성이 높은 경우
--	--

 경고	표기사항 위반 시 중상이나 사망 가능성이 있는 경우
--	------------------------------

 주의	표기사항 위반 시 경미한 상해나 물적 손상 발생 가능성이 있는 경우
--	---------------------------------------



위험

전기적 충격을 줄이기 위해 다음 사항을 준수하여 주세요.

1. 본 제품 사용 시 편이나 다른 금속물질을 사용하지 마세요.
2. 사용 전 꼭 프레임을 확인하세요.
(균열, 분열 등의 제품 노화상태가 보이면 사용을 중단하시기 바랍니다.)
3. 습기 또는 물기가 있는 상태에서는 사용하지 마세요.
4. 외부도자 사용 시 반드시 도자밴드를 씌워서 도자가 피부에 직접 닿지 않도록 해주세요.
(화상의 위험이 있습니다.)
5. 안구(눈동자)의 손상 방지를 위하여 외부도자를 안구에 직접 대고 사용하지 마세요.
6. 천둥, 번개가 치거나 지진 발생시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 빼주세요.
(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
7. 코드부분을 잡아당겨 뽑거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
8. 모드의 복부압박자극 구간 및 매뉴얼 모드 이외에 엷드린 상태로 사용하지 마세요.
(엷드려 사용할 경우 갈비뼈 부위는 사용하지 마시고 복부에만 사용하시기 바랍니다.)



중요안전사항



경고

화상, 발화, 전기적인 충격으로 인한 인명피해를 줄이기 위해서는 반드시 접지가 되어 있는 콘센트에 제품을 연결하여 사용하세요. 반드시 접지 방법을 확인하신 후 사용하세요.

1. 반드시 기술적으로 완벽한 상태에서 제품을 사용하세요.
(손상된 제품을 사용하면 부상이나 화상을 입을 수 있습니다.)
2. 사용이 끝나거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원코드를 빼주세요.
3. 당사가 지급한 도자밴드 및 걸천 이외에 화재가 발생할 수 있는 물건(섬유제품, 이불 등)이나 기타 물질을 외부도자나 제품 위에 올려 놓지 마세요.
(과열로 인해 화재, 감전의 원인이 되거나 인명 피해가 발생될 수 있습니다.)
4. 장애인이나 어린이가 사용할 경우 보호자가 동석해 주세요.
*경고! 제품 설치 장소로부터 어린이를 멀리해 주세요.
*경고! 어린이가 온열기 위에서 뛰지 않도록 해주세요.
5. 다음과 같은 경우 절대로 사용하지 마시고 고객센터로 점검 및 서비스 의뢰하세요.
 - 제품을 떨어뜨리거나 제품이 파손 되었을 경우
 - 제품이 물에 젖었을 경우
 - 전선이나 전원코드가 손상되었을 경우(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
6. 전원코드를 난로와 같은 전열기구로부터 멀리해 주세요.
7. 본 제품은 실내에서만 사용되도록 설계되었습니다. 실외에서는 사용하지 마세요.
8. 공기 중 이물질이 떠 있는 곳이나 산소를 취급하는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.
9. 제품을 사용하기 전과 사용하는 동안에는 스킨케어 제품이나 화장품, 의약품을 피부에 바르지 마세요.
10. 제품 분리 시 리모콘과 본체 전원을 "Off"에 놓고 전원코드를 빼 주세요.
11. 발열된 표면 사용 시 주의하세요.
(심각한 화상의 원인이 될 수 있습니다.)
12. 제품의 도자를 민감도가 떨어지는 부위나 혈액순환이 원활하지 못한 신체 부위에 사용하지 마세요.
(제품에 남은 열은 어린이나 건강이 좋지 않은 분들에게 위험할 수 있습니다.)
13. 제품 위에서 수면을 취하지 마세요. 화상을 입거나 척추에 무리가 발생할 수 있습니다.
14. 임의로 제품을 분해/수리/개조하지 마세요. 수리가 필요할 때는 고객센터로 연락해주세요.
(감전 및 화재, 부상, 화상 등의 위험이 있습니다.)
15. 본체와 보조매트 사이에 손을 넣거나 신체 일부가 들어가지 않도록 주의하세요.
(감전 및 부상의 위험이 있습니다.)
16. 다음과 같은 경우에는 반드시 의사와 상의한 후에 제품을 사용하세요.
 - 각종 질환이 있거나 의심되는 경우
 - (악성종양환자/고열환자/기력이 극도로 쇠약해진 사람/생명연장 기구 사용자 등)



중요안전사항

- 알레르기 또는 열에 과민반응을 보이는 경우
- 임신 중이거나 임신 예정일 경우
- 최근에 수술한 환자
- 제품을 사용할 때 직접적으로 닿는 피부에 염증이나 외상이 있는 경우
- 아주 고령의 나이에 골다공증이 있는 사람
- 고통의 감각을 잘 못 느끼는 사람
- 발열 증세나 암이 있는 사람

현재로서는 본 제품이 의학물질에 개입하거나 영향을 미친다는 것을 제안하는 증거가 없습니다. 그러므로 약을 복용하는 사람은 제품을 사용하기 전에 의사와 상담을 해야 합니다.



주의

1. 내부도자 작동 시 신체를 비틀지 마시고 곧은 자세로 사용하세요.
2. 고온 설정 시 화상이 우려되오니 도자의 온도를 적정온도로 사용하세요.
(체질 및 피부 두께 등의 상태에 따라 적절한 온도로 사용하시기 바랍니다.)
3. 피부가 예민한 분은 온도를 낮게 설정하세요. (화상의 위험이 있습니다.)
4. 어린이, 자신이 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부감각이 약한 분 등이 장시간 사용하실 때에는 낮은 온도 설정에도 불구하고 저온 화상의 위험이 있으니 주의하세요.
*주의! 반드시 옷을 입고 사용하세요.
5. 제품 사용 중 몸에 이상이 생기면 반드시 의사와 상의한 후에 사용하세요.
6. 전원코드와 외부 배선을 무리하게 구부리지 마세요. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
7. 제품 위에 촛불, 담배, 술 등의 인화물질 또는 물이 담긴 그릇, 무거운 물건, 날카로운 물건 등을 올려놓지 마세요. (감전 및 화재, 파손의 원인이 됩니다.)
8. 제품에 오르거나 내리실 때 떨어질 위험이 있으니 주의하세요.
9. 사용설명서에 따라 사용하시고 사용시간 및 방법을 준수하세요.
(1일 1~2회 사용하여 주시고 제조자가 공급한 물건 외에는 사용하지 마시기 바랍니다.)
10. 신체의 한 부위에서 2~3분을 초과하여 사용하지 마세요.
(2~3분 사용 후에는 도자를 다른 부위로 이동시켜야 합니다.)
11. 제품에 충격을 가하지 마세요.
12. 제품 사용 중 보조매트를 닫거나 리모콘을 분리하지 마세요.
(진행중인 모드가 자동으로 종료됩니다.)
13. 본체와 보조매트 사이 공간으로 이물질이 들어가거나 들어가지 않도록 주의하세요.
(감전 및 화재, 부상 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.)
14. 리모콘을 던지거나 연결선을 잡고 휘두르거나 돌리지 마세요.
(부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

※ 증상에 대한 주요 정보

때로는 초기증상이라는 현상이 나타날 수도 있습니다. 초기증상은 호전반응으로 정의되는 또 다른 개념으로써 대체의학이라고 알려져 있습니다. 척추 만성질환과 관련된 통증, 고혈압, 심장혈 관계질환, 현기증이 있는 경우는 사용강도(설정시간, 온도)를 줄이고, 초기증상이 지나친 통증으로 이어질 경우, 사용을 즉시 중지하고 의사와 상담 후 지속적으로 사용하거나 혹은 중지하시기 바랍니다.



접지 방법


본 제품은 반드시 접지가 되어야 합니다. 접지는 기계의 결함이나 고장 시 전기적인 충격의 손상을 감소시키기 위하여 전류에 대한 최소 저항의 통로를 준비하는 것입니다. 제품에는 접지 도체와 접지 단자가 있는 전원코드가 장착되어 있습니다. 전원코드는 모든 지역 코드와 법령에 적합하도록 설치되어, 반드시 접지가 되어 있는 콘센트에 연결해야 합니다.



위험

장착된 접지 도체의 연결부분을 확인하세요.
(부적합한 연결은 전기적 충격에 의해 손상을 가져 옵니다.)

제품의 접지가 올바른지 의심이 된다면 공인된 전기 기술자나 서비스 요원에게 검사를 의뢰하시기 바랍니다. 이 제품은 AC 220V용이고 오른쪽 그림과 같이 접지 단자가 장착되어 있습니다. 그림의 단자와 같은 모양의 콘센트를 사용하여 제품에 연결하시기 바랍니다. 이 제품은 어댑터를 사용하지 않습니다.

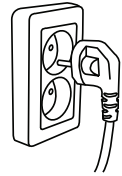

사용자에게 알림

본 제품은 B등급의 디지털 장비의 제한 사항에 의거하여 시험 및 확인되었으며 FCC 규제 제 15항에 따릅니다. 이러한 규제는 주택에 설치했을 때 유해한 영향으로부터 적절한 보호를 받기 위하여 제정되었습니다.

본 제품은 라디오 주파수 발생 및 에너지를 방사할 수 있습니다.

사용설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 때는 라디오 통신에 유해한 영향을 줄 수 있습니다. 또한 특수한 설치 하에서는 그러한 영향이 발생되지 않는다는 것을 보장하지 않습니다. 만일 제품이 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 영향을 준다면 사용자는 제품의 전원을 켜거나 끄는 것을 결정해야 합니다.

다음 방법 중 하나 이상의 방법으로 유해한 영향을 수정할 수 있도록 권장합니다.

- 수신 안테나 위치를 변경합니다.
- 제품과 수신기 간의 거리를 변경합니다.
- 수신기가 연결되어 있는 전원 라인과 다른 회로 상의 전원에 제품을 연결합니다.
- 고객센터에 문의하거나 공인된 라디오/텔레비전 기술자의 도움을 받습니다.




경고

- 소비자 임의로 변경하거나 개조하지 마세요. (제품 손상의 원인이 됩니다.)
- 본 제품은 AC 220V 전용이오니, 확인하신 후 사용하세요.

차 례

>> 중요 안전사항	01
- 위험	
- 경고	
- 주의	
I. 제품 소개편	07
1. 제품 특징	
2. 각 부위 명칭	
II. 설치 및 준비편	11
1. 제품 구성품 확인	
2. 제품 설치 전 확인	
3. 제품 설치	
4. 제품 설치 후 확인	
III. 제품 사용편	17
1. 리모콘 구성	
2. 리모콘 사용방법	
3. 모드별 사용방법	
4. 제품 이동방법	
IV. 관리 및 주의 사항편	33
1. 자가 점검	
2. 관리요령 및 보관방법	
3. A/S 신청 전 확인	
4. 리모콘 에러 메시지	
5. 제품 사양	
6. 제품 보증서	

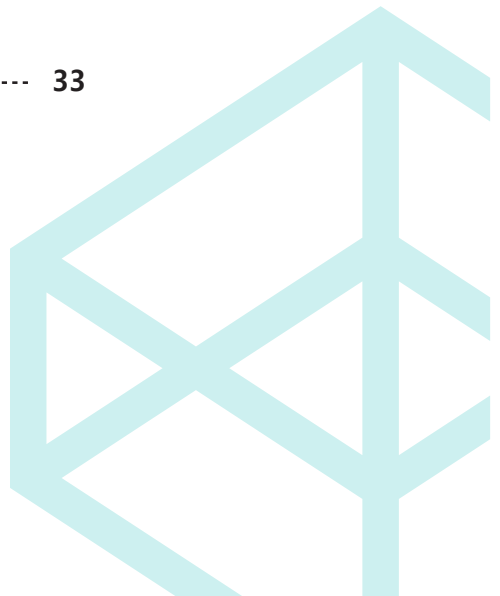

I. 제품 소개편

1. 제품 특징
2. 각 부위 명칭





1. 제품 특징

1. 아름답고 사용이 편리한 외관 디자인

아름답고 사용이 편리한 외관 디자인은 집안의 어떤 인테리어 소품과도 잘 어울리며, 보조매트는 슬라이딩 방식으로 공간절약과 편의성까지 생각하였습니다.

2. 하중인식 기능

새로운 하중인식 기능은 자동으로 사용자의 척추 길이를 측정하여 최적의 맞춤 압박 자극을 제공합니다.

3. 강도조절 기능

사용자가 원하는 수준으로 6단계의 강도조절이 가능합니다.

4. 다양한 압박자극 프로그램 제공

대체의학의 사상적 배경을 토대로 제작된 압박자극 프로그램은 사용자가 원하는대로 다양한 선택이 가능합니다.

5. 세라젠타운드 기능

세라젠타운드는 제품 사용 시 정신적 편안함을 제공하고 압박자극 효과 증진에 도움을 줍니다.

6. 슬림하고 조작이 간편한 리모콘

얇고 가벼운 리모콘은 기능키를 아이콘 형태로 시각화하여 제품 사용이 한층 편리하며 조작이 간편합니다.

7. 보조매트 온열소파 기능


보조매트에 리모콘으로 온도제어가 가능한 발열선이 내장되어 있어 제품 미사용 시 (보조매트 닫힘 상태)에도 온열소파 등으로 사용이 가능합니다.

8. 외부도자(3구/9구) 제공

본체 압박자극 사용 중 함께 사용 가능한 외부도자를 기본 제공하며 복부, 어깨, 팔, 다리 등 신체 부위에 알맞게 3구 또는 9구 외부도자를 선택하여 사용할 수 있습니다.



2. 각 부위 명칭

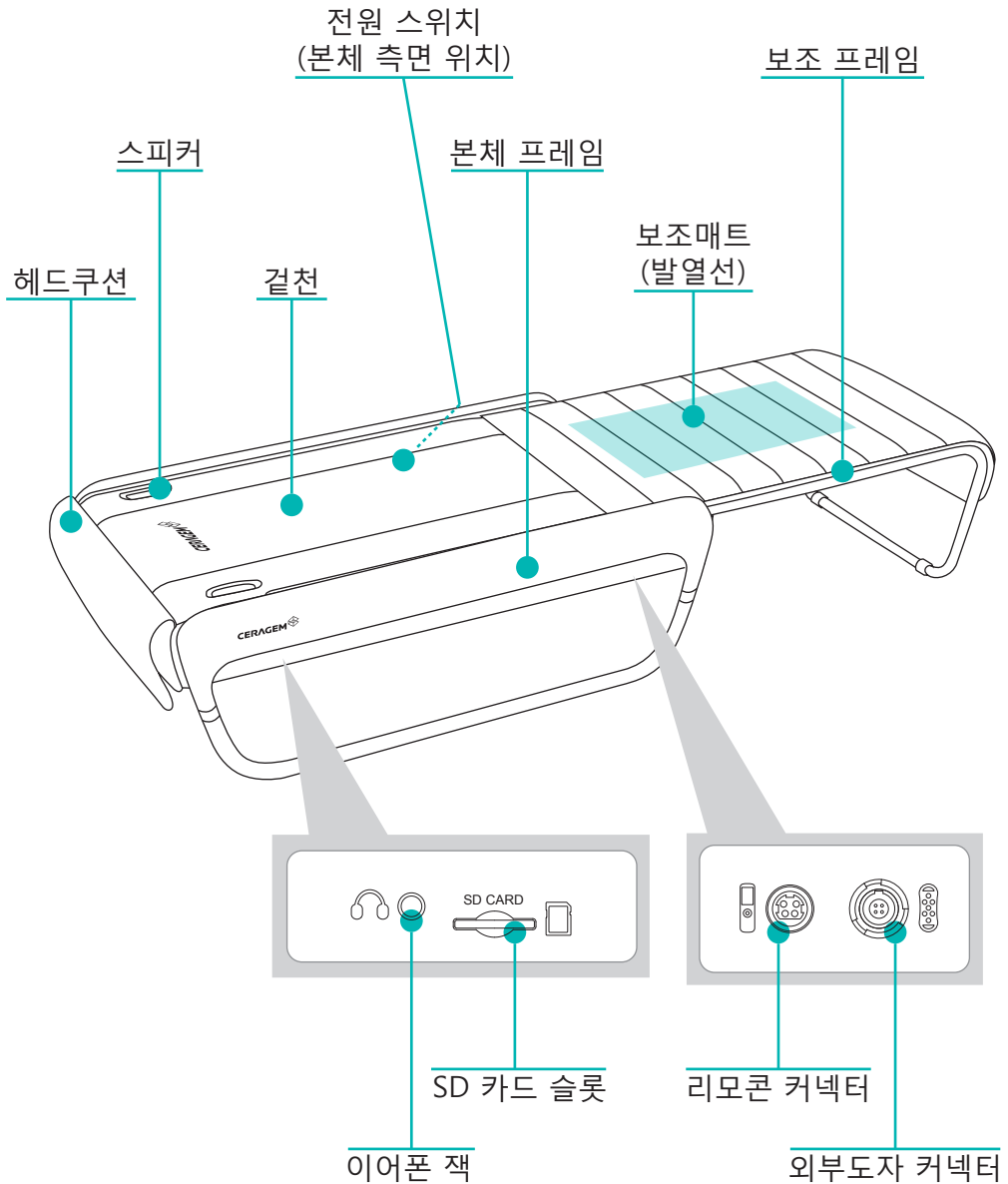

MEMO


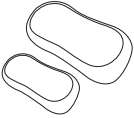

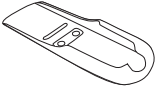







A series of horizontal dashed lines for writing.

II. 설치 및 준비편

1. 제품 구성품 확인
2. 제품 설치 전 확인
3. 제품 설치
4. 제품 설치 후 확인

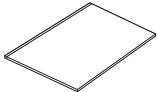

1. 제품 구성품 확인

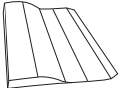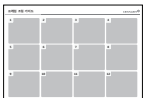1		외부도자(3구, 9구) 복부, 어깨, 팔, 다리 등의 신체 부위에 사용하기 편리하며 본체 사용 시 함께 사용하거나 2인이 나누어 사용할 수 있습니다.
2		도자밴드 외부도자에 씌워서 사용할 수 있습니다.
3		리모콘 제품의 기능을 조작하며 작동상태 확인을 위해 사용합니다.
4		리모콘 거치대 리모콘 거치대를 본체 프레임에 조립하여 사용할 수 있습니다.
5		리모콘백라벨 리모콘 키에대한 설명이 되어있으며, 리모콘 뒷면에 부착하여 사용할 수 있습니다.
6		전원코드 본체와 연결한 뒤 콘센트에 꽂아 사용합니다.
7		사용설명서 제품 사용에 관한 내용이 기입되어 있습니다.
8		SD 카드 기본적으로 저장된 세라젼사운드 외에 사용자가 원하는 음악을 추가하여 사용할 수 있습니다.
9		겔천 제품 오염 및 화상으로부터 보호해 주며, 탈착식으로 세탁이 가능합니다.
10		헤드쿠션 제품본체 상단에 부착하여 사용합니다.
11		조립가이드 제품 설치 방법이 상세하게 표기되어 있습니다.



2. 제품 설치 전 확인

1. 바닥이 평평한 곳에 설치해 주세요.
(제품이 파손 될 우려가 있습니다.)

2. 습기나 먼지가 많은 곳에서는 가급적 설치를 피해주세요.
(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)


3 지정된 순서에 맞게 설치해 주세요.

4. 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마세요.
(오작동의 위험이 있습니다.)

5. 제품을 설치할 때 정격전압(AC 220V)을 확인해 주세요.
(회로 파손 및 화재의 원인이 될 수도 있습니다.)


6. 손상된 전원코드나 플러그, 낡은 콘센트를 사용하지 마세요.

7. 반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연결하세요.
(감전의 위험이 있습니다.)

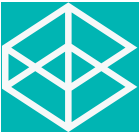


3. 제품 설치

1 포장박스에서 제품 및 부속품을 꺼내세요.

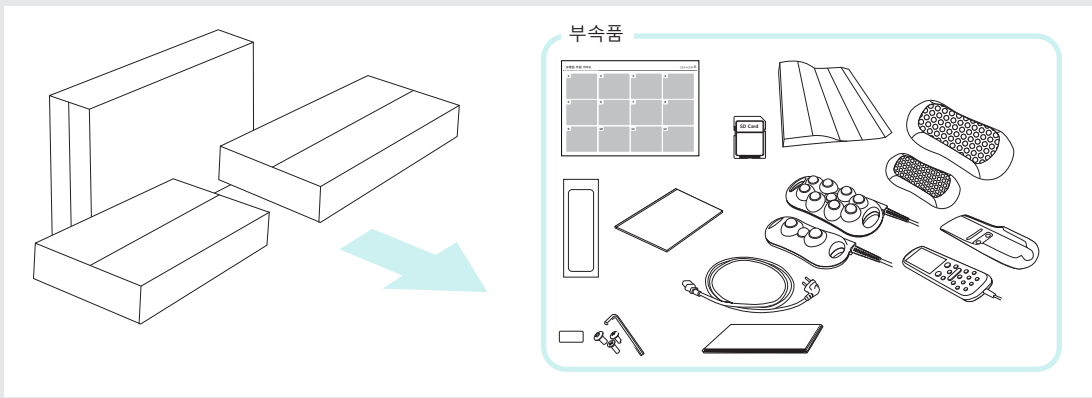


2 보조매트를 슬라이딩 레일에 끼우신 후 걸천과 헤드쿠션이 부착된 본체매트를 본체프레임 위에 올려 놓으세요.

(보조 프레임을 본체의 중간지점까지 이동시킨 후 본체매트를 끝까지 밀어 넣으세요.)

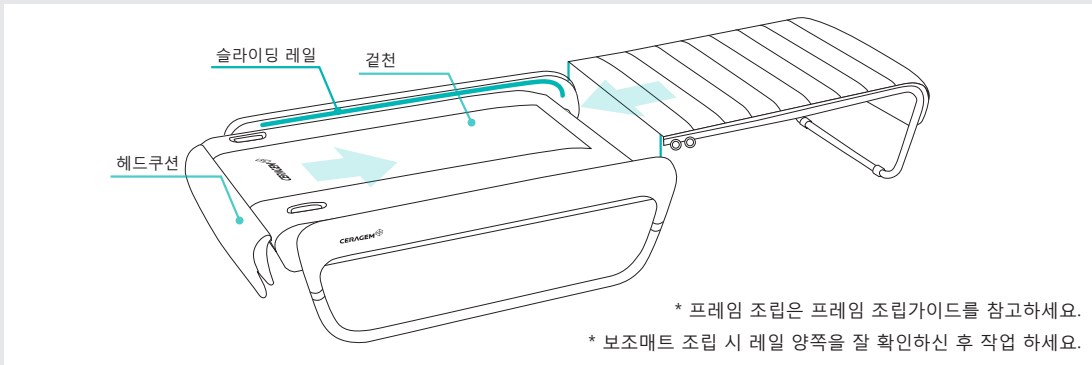

3 본체에 부착되어있는 케이블을 보조프레임에 있는 커넥터와 연결하세요.

(보조 프레임을 끝까지 여신 후 연결하세요.)

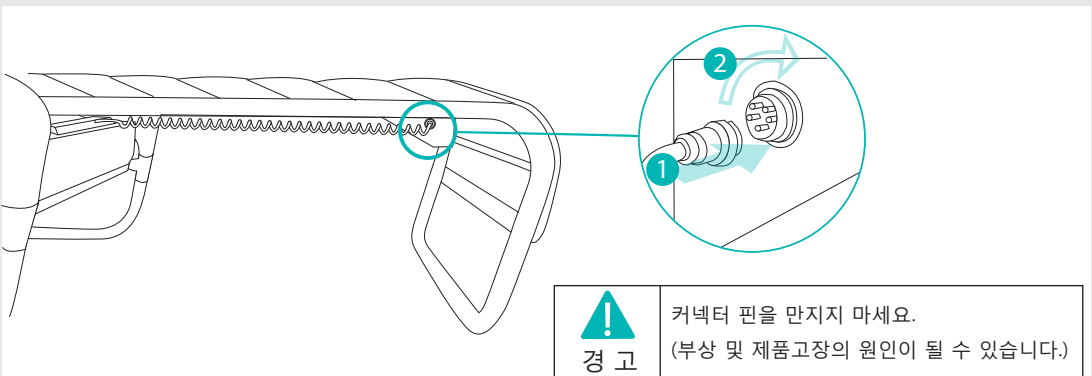




3. 제품 설치

4

리모콘 거치대를 프레임에 조립하시고, 리모콘을 거치대에 끼우세요.
SD 카드와 리모콘, 외부도자 커넥터를 확인하시고 맞게 연결하세요.

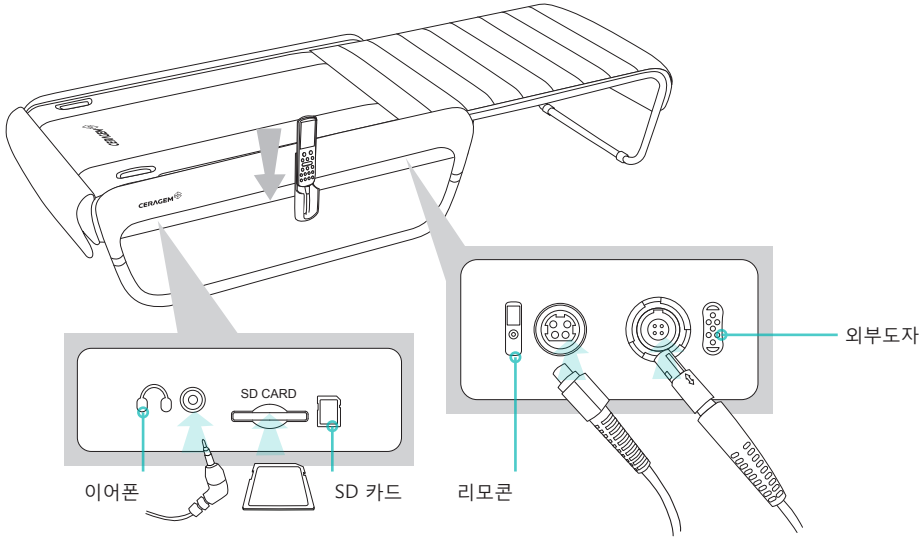

주의

이어폰은 사용시에만 연결하세요.
SD 카드는 뒷면(스티커 부착부)을 확인하시고 본체에 삽입해 주세요.
전원을 끈 후 SD 카드를 끝까지 밀어넣어 주세요.




경고

커넥터 핀을 만지지 마세요.
(부상 및 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.)

5

본체에 전원코드를 연결한 뒤 콘센트에 끼우세요.

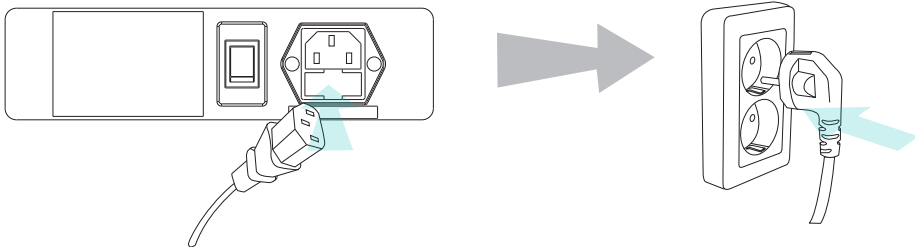

주의


전원스위치가 "켜짐" 상태에서 전원코드를 연결하면 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.



4. 제품 설치 후 확인


1

본체 측면에 위치한 전원을 켜주세요.
(제품을 사용하지 않을 때에는 전원을 꺼주시기 바랍니다.)

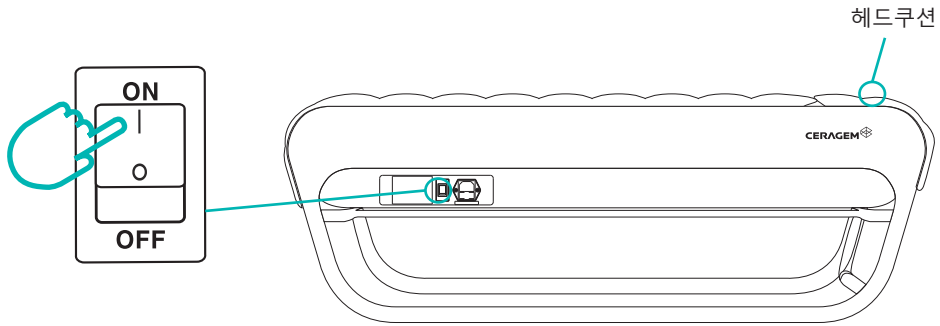

2

리모콘의 전원키를 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요.

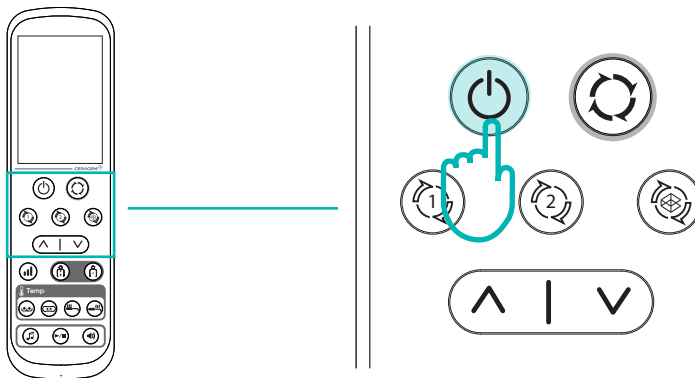

*리모콘 화면은 20페이지 참고하세요.



주의

1. 전원코드를 연결하기 전에 리모콘을 먼저 연결하세요.
2. 사용자에 따라 적절한 온도로 설정하여 제품을 사용하세요.
3. 사용이 끝나면 리모콘의 전원을 끈 후 본체 전원을 꺼주세요.


Ⅲ. 제품 사용편

1. 리모콘 구성
2. 리모콘 사용방법
3. 모드별 사용방법
4. 제품 이동방법



1. 리모콘 구성


리모콘키 구성

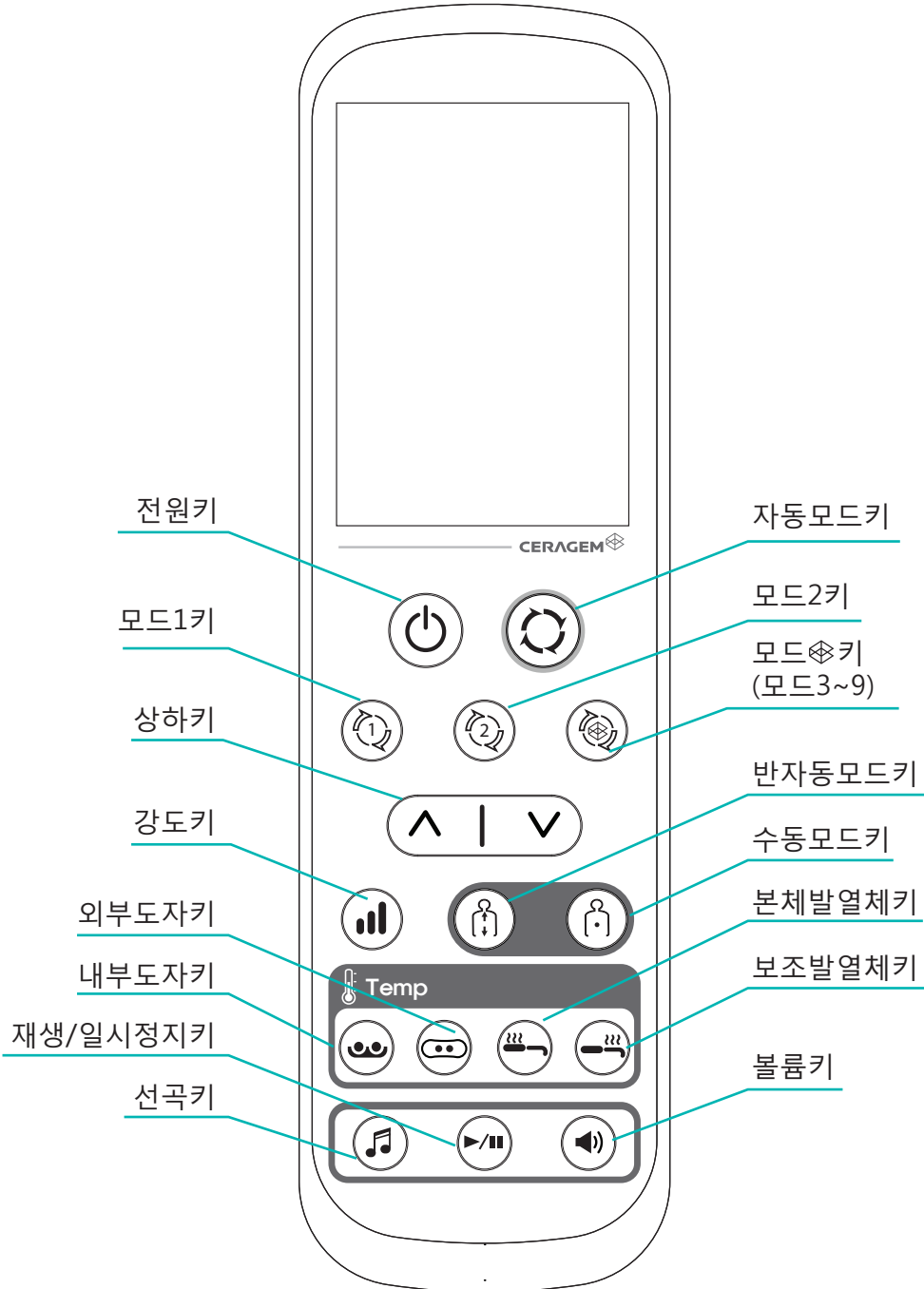



1. 리모콘 구성

화면 구성

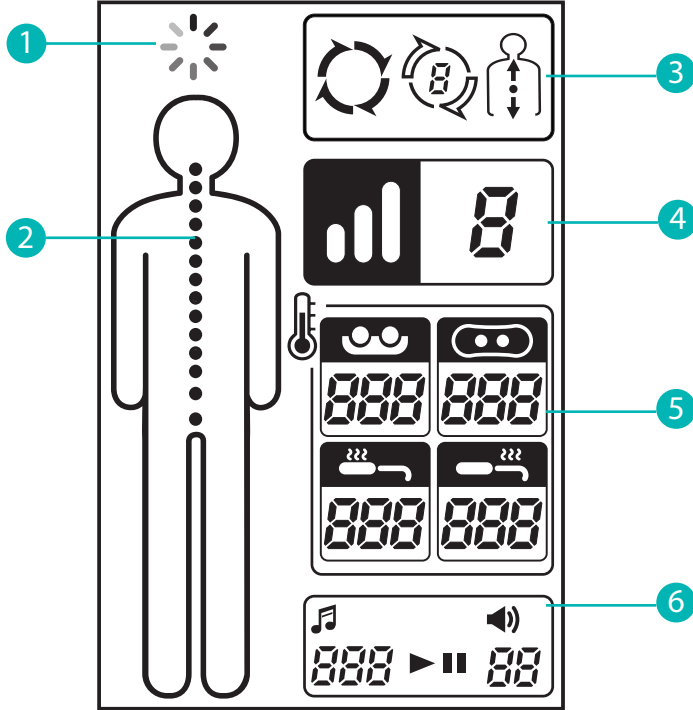


1	하중인식 표시 하중인식 시 표시창이 회전하며 진행 상태를 표시해 줍니다.
2	내부도자 위치 표시 내부도자 위치를 표시해 줍니다
3	모드 표시 (자동모드, 모드1~9, 반자동모드, 수동모드) 사용하고 있는 모드를 표시해 줍니다.
4	강도 표시 사용하고 있는 압박자극 강도를 표시해 줍니다.
5	온도 표시 (내부도자, 외부도자, 본체발열체, 보조발열체) 온도 측정값 또는 설정값을 표시해 줍니다.
6	사운드 표시 (곡번호, 재생/일시정지, 볼륨) 사운드 관련 정보를 표시해 줍니다.




2. 리모콘 사용방법

리모콘 켜기

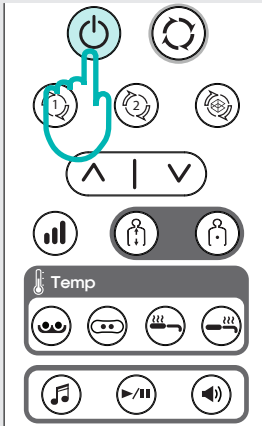

1. 제품 본체 연결상태를 확인하신 후 리모콘 전원키를 누르세요.


- 리모콘을 끄실 때에는 전원키를 1초 이상 길게 눌러주시기 바랍니다.

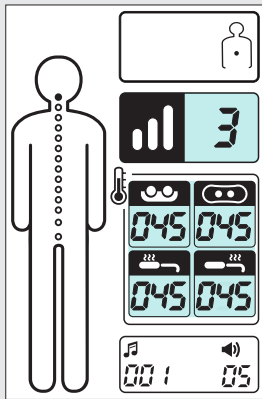

2. 리모콘 화면을 확인하세요.

- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

- 리모콘이 켜지면 내부도자는 자동으로 머리 위치로 이동합니다.

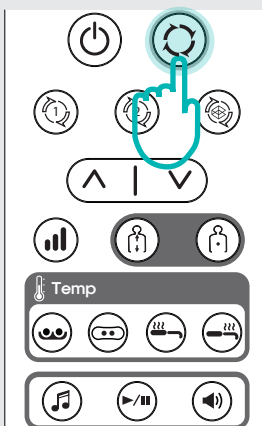

3. 사용하실 키를 선택하세요.


- 모드 선택은 25~28페이지를 참고하시기 바랍니다.



2. 리모콘 사용방법


강도조절

모드 사용시 내부도자의 강도를 조절할 수 있습니다.

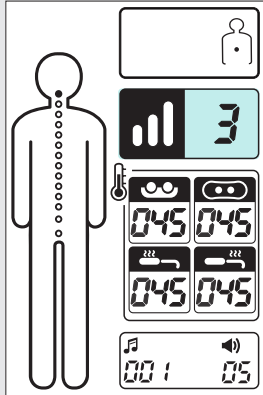


1. 현재 강도를 확인하세요.

- 강도키를 누르면 강도 설정값이 깜박입니다.

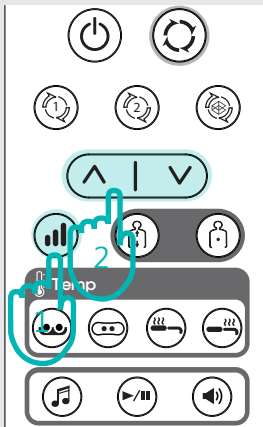

2. 강도키를 누른 후 상하키를 이용하여 원하는 강도로 조절하세요.

- 강도는 1~6단까지 조절 가능합니다.

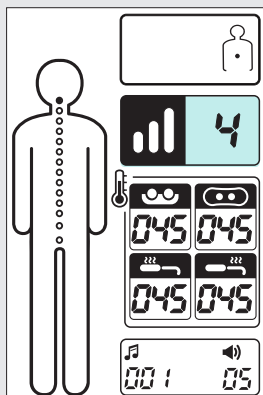


3. 리모콘 화면에서 변경된 강도 설정값을 확인하세요.




2. 리모콘 사용방법

온도조절

모드 사용 시 내부도자, 외부도자, 본체발열체, 보조발열체의 온도를 조절할 수 있습니다.

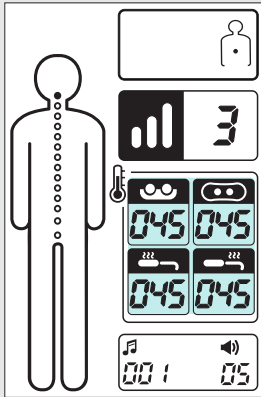


1. 현재 온도를 확인하세요.

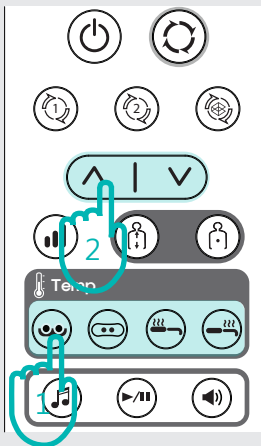

2. 변경하고 싶은 온도키를 누른 후 상하키를 이용하여 원하는 온도로 조절하세요.

- 온도 설정키를 누르면 온도 설정값이 점멸됩니다.

내부도자	외부도자	본체발열체	보조발열체
OFF, 30°C~65°C	OFF, 30°C~60°C		

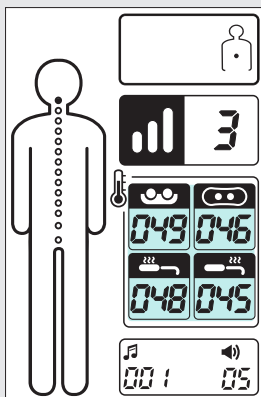

3. 리모콘 화면에서 변경된 온도 설정값을 확인하세요.


- 온도 설정이 완료되면 잠시 후 현재 온도값으로 전환됩니다.




2. 리모콘 사용방법

사운드조절

모드 사용 시 사운드 상태를 조절할 수 있습니다.

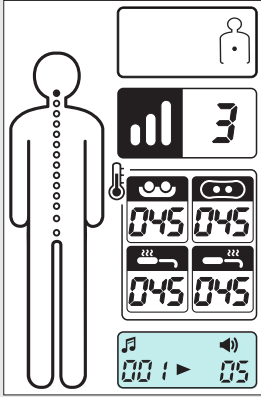


1. 현재 사운드 상태를 확인하세요.

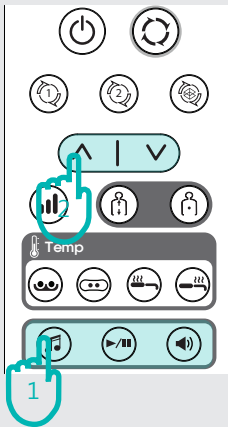

2. 변경하고싶은 사운드키를 누른 후 상하키를 이용하여 원하는 값으로 조절하세요.

🎵	▶/⏸	🔊
선곡	재생/일시정지	볼륨
세라젼사운드: 1~10 사용자사운드: 11~100		0~10

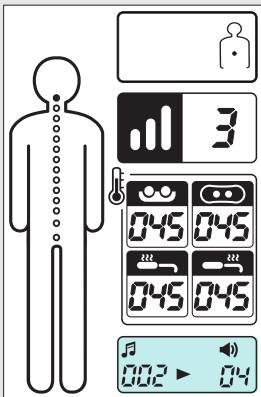

3. 리모콘 화면에서 변경된 사운드 상태를 확인하세요.

온열소파란?


보조매트가 닫혀있을 시 온도를 조절하여 따뜻한 상태로 사용할 수 있는 기능입니다.



2. 리모콘 사용방법


보조매트 닫혔을 시

보조매트가 닫혀있을 시 외부도자와 온열소파 기능을 사용할 수 있습니다.

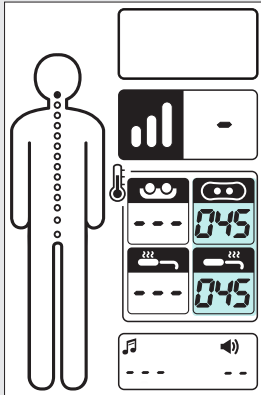


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.

- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.

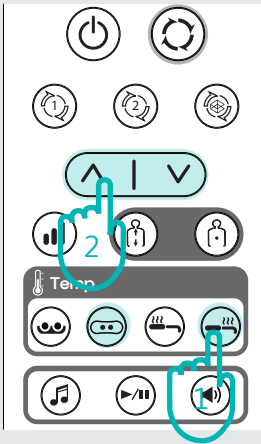

2. 변경하고 싶은 온도키를 누른 후 상하키를 이용하여 원하는 온도로 조절하세요.

외부도자	보조발열체
OFF, 30°C~60°C	

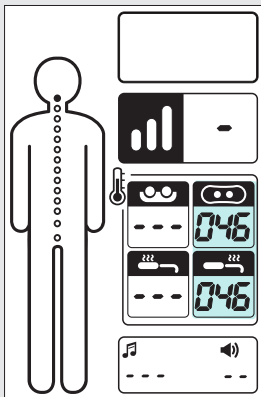

3. 리모콘 화면에서 변경된 온도 설정값을 확인하세요.

- 온도설정이 완료되면 잠시 후 현재 온도값으로 전환됩니다.


* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.



3. 모드별 사용방법


자동모드 (모드시간: 약 36분 30초)

자동모드는 별도의 조작 없이 제품의 하중인식, 압박자극, 온열자극, 세라젬사운드 기능이 실행되어 사용할 수 있습니다.

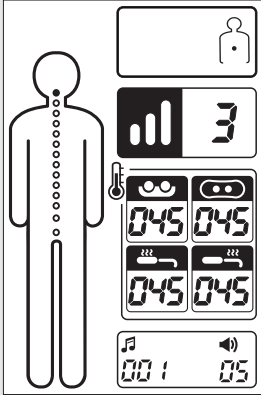



1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.

- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

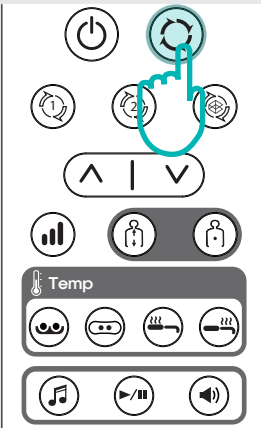

2. 자동모드키를 2번 누르면(수동모드일 경우 1번 누르면) 세라젬 사운드가 재생되고, 부저음과 함께 하중인식이 시작되오니 올바른 자세로 누워주세요.

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

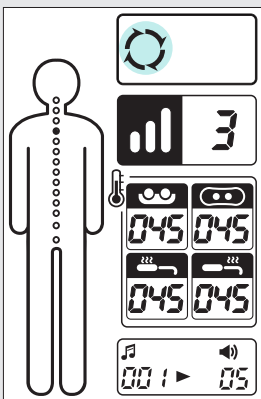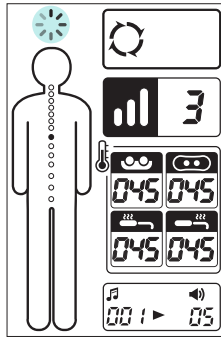

3. 하중인식이 끝나면 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.


- 복부 모드시 부저음이 울립니다. 복부압박자극 자세를 취해주시기 바랍니다.
- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 복부 모드는 사용자가 옆드린 자세를 취하여 복부의 압박 자극 및 온열자극이 이루어 지도록 합니다.

* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 1~9 (모드시간: 약 36분 30초, 모드2: 약18분)

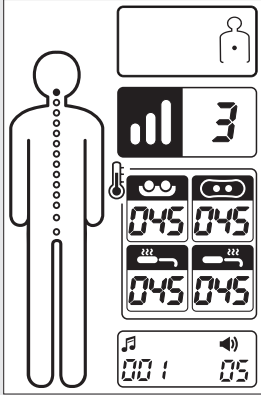


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.

- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

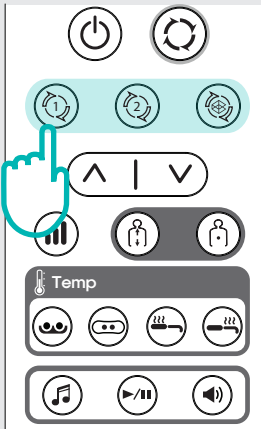


2. 모드 1, 2, 3~9키를 2번 누르면(수동모드일 경우 1번 누르면) 세라젼 사운드가 재생되고 부저음과 함께 하중인식이 시작 되오니 올바른 자세로 누워주세요.

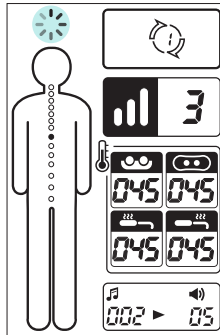

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

	2번 누름(모드1선택)
	2번 누름(모드2선택)
	연속 누름(모드3~9 순차적 선택)

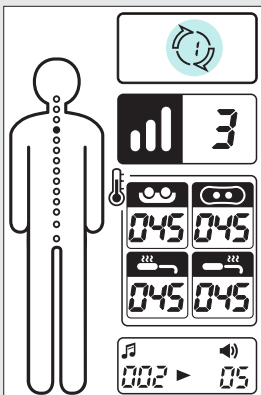

3. 하중인식이 끝나면 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.


모드 1	모드 2 (18분)	모드 3	모드 4	모드 5	모드 6	모드 7	모드 8	모드 9

* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

반자동모드 (모드시간: 약 18분)

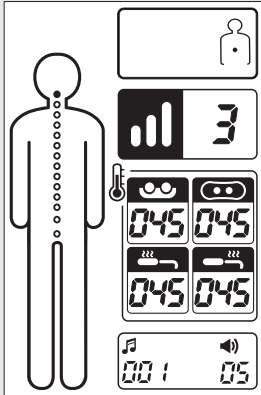


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.


- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

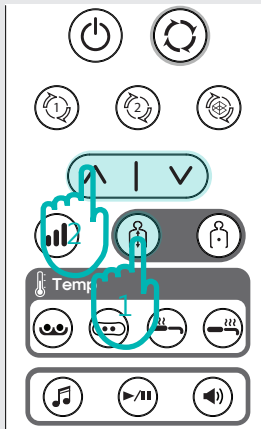

2. 반자동모드키를 2번 누른 뒤(수동모드일 경우 1번 누른 뒤) 원하는 지점으로 내부도자를 이동시키세요.

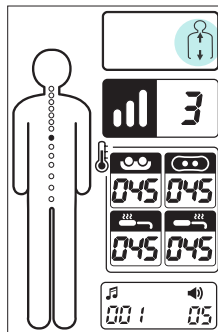

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

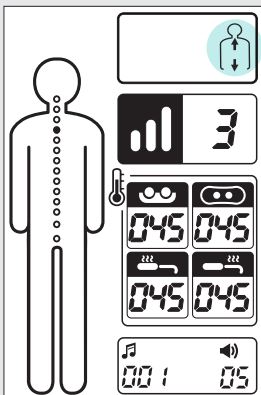


3. 지정하신 위치를 기준으로 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 모드 종료 시 부저음이 울리고 리모콘이 꺼집니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.

* 모드 시간은 사용자 체형에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.


3. 모드별 사용방법

수동모드 (모드시간: 약 60분)

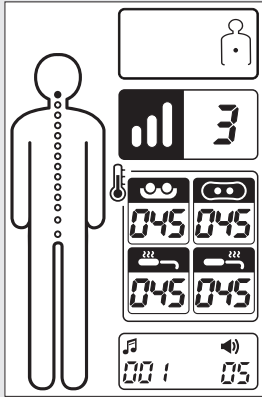


1. 리모콘 전원을 켜 뒤 화면을 확인하세요.


- 외부도자는 연결 시에만 나타납니다.
- 현재 강도 및 온도가 표시됩니다.

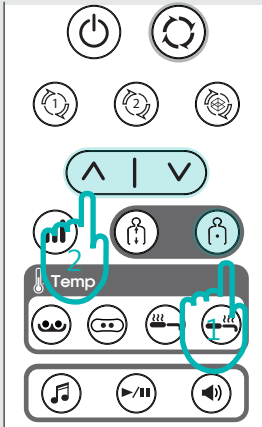

2. 수동모드키를 2번 누른 뒤 원하는 지점으로 내부도자를 이동시키세요.

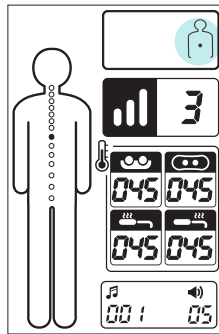

- 한번 누르면 현재 동작중인 모드 상태가 3초간 점멸하며, 3초 이내에 다시 누르면 모드가 변경됩니다.
- 현재 수동모드 상태일 경우에는 모드가 점멸 없이 즉시 변경됩니다.

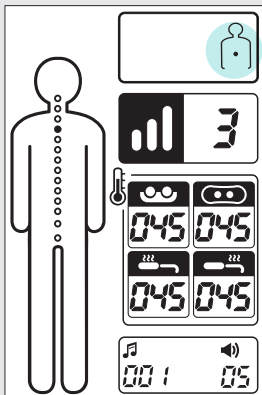

3. 지정하신 위치에서 온열자극이 시작되오니 올바른 자세를 유지해 주세요.

- 리모콘 조작 후 5분이 경과하면 화상방지를 위해 내부도자가 자동으로 이동합니다.
- 리모콘 조작 후 60분이 지나면 자동으로 리모콘이 꺼지며 모드가 종료 됩니다.
- 강도, 온도, 사운드 설정은 21~23페이지를 참고하시기 바랍니다.

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)

자동모드


(모드시간: 약 36분 30초)

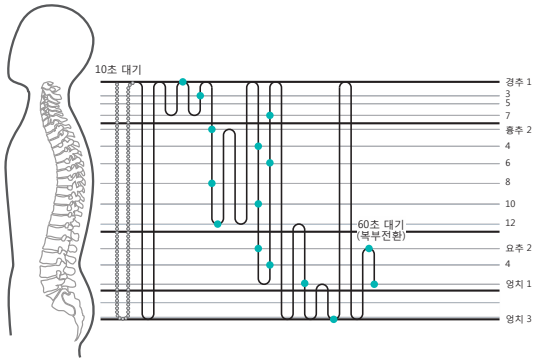

모드 1


(모드시간: 약 36분 30초)

● 온열자극(100초)

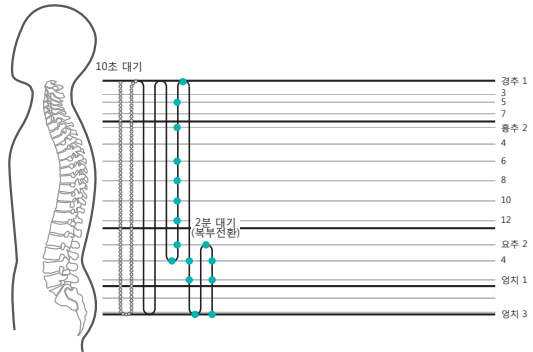


모드 2

(모드시간: 약 18분)

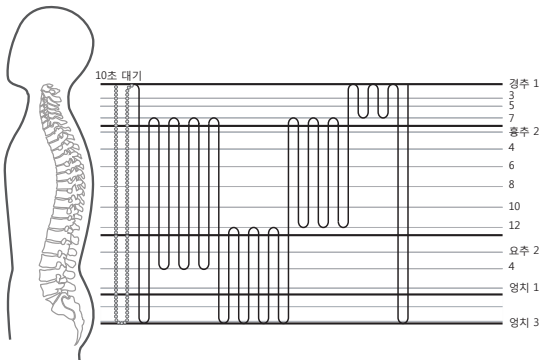

모드 3

(모드시간: 약 36분 30초)

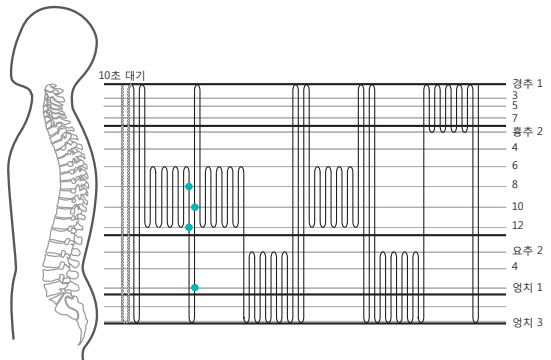

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)


모드 4

(모드시간: 약 36분 30초)

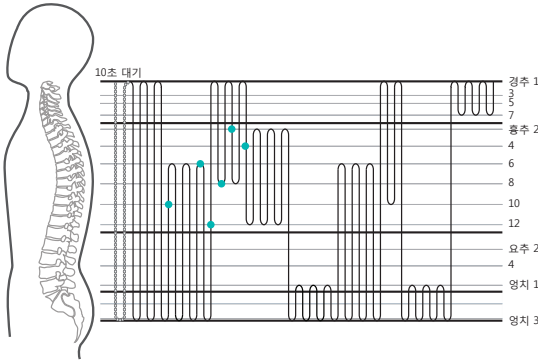


모드 5

(모드시간: 약 36분 30초)

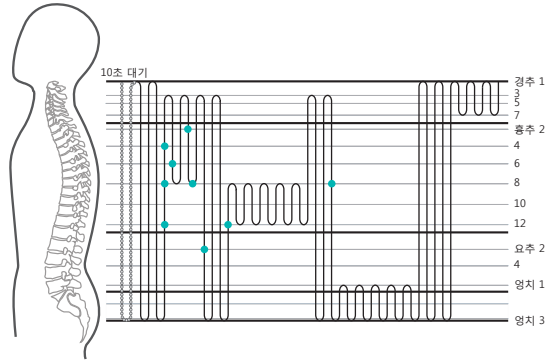


모드 6

(모드시간: 약 36분 30초)

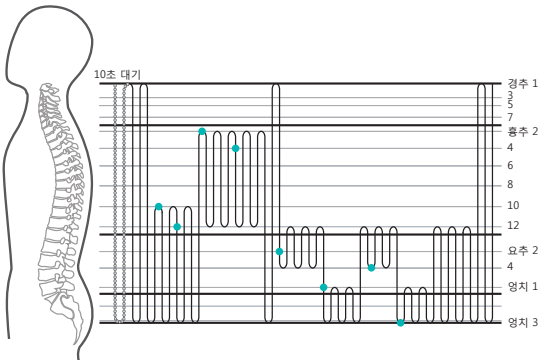

모드 7

(모드시간: 약 36분 30초)

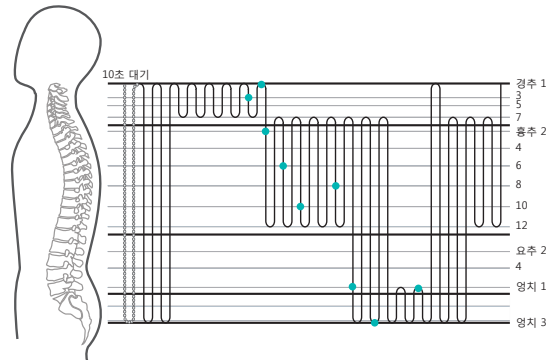

* 사용자별 신장(키) 차이에 따라 마사지 패턴 변화가 있을 수 있습니다.




3. 모드별 사용방법

모드 패턴

○○○○○○ 하중인식 ● 온열자극(88초)


모드 8

(모드시간: 약 36분 30초)

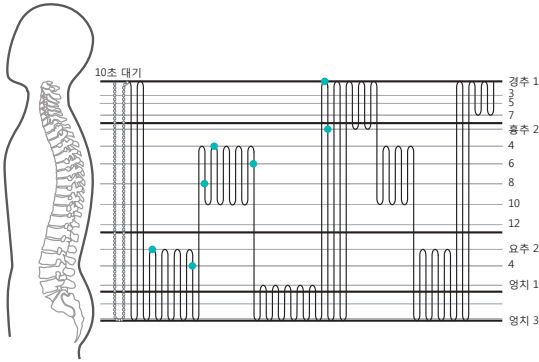

모드 9


(모드시간: 약 36분 30초)

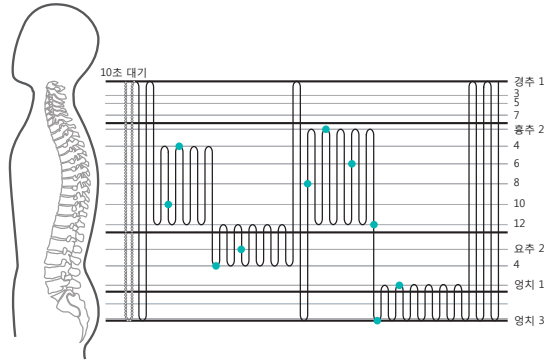


반자동 모드

(모드시간: 약 18분)

내부도자 최종위치를 기준으로 일정 구간에서 반복 마사지

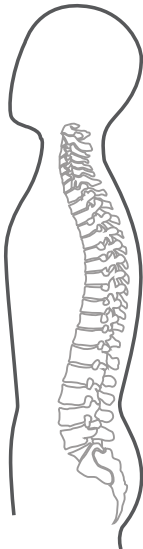

● 상하이동(3회) + 온열자극(60초)

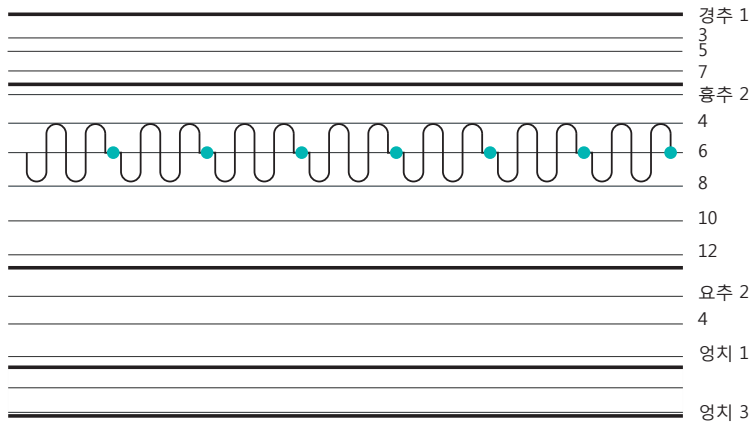


※ 사용자가 위치를 조절하여 사용할 수 있습니다.



4. 제품 이동방법

1

본체에서 전원코드, 리모콘, 외부도자를 분리한 후 헤드쿠션을 올리고 보조매트를 들어올리며 닫으세요. (보조매트를 열 때는 반대로 보조매트를 앞으로 당긴 후 위로 들어올리며 내려주세요.)

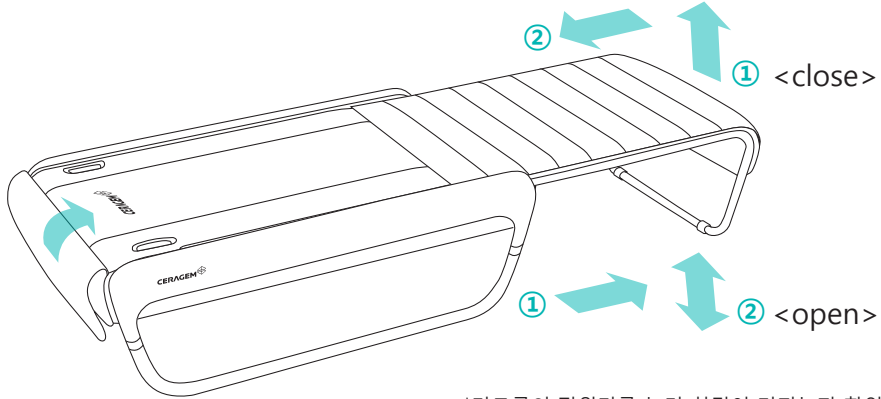

*리모콘의 전원키를 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요.




주의

이동 시 리모콘의 전원을 끈 후 본체 전원을 꺼주세요.
(리모콘 전원을 끈 후 약 10초 뒤 보조 프레임을 닫아주시기 바랍니다.)

2

두 사람이 함께 양쪽 본체 하단프레임을 잡고 수평으로 들어 이동하세요.

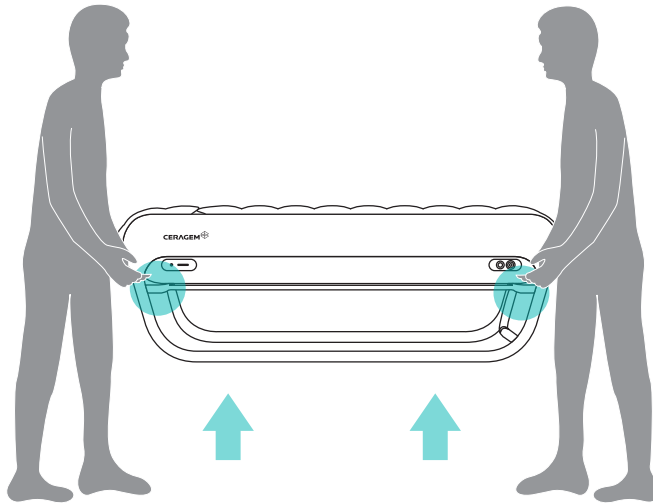

주의

제품을 들어올릴 때 허리를 펴고 무릎을 구부린 상태에서 천천히 들어 올리세요.

IV. 관리 및 주의 사항

1. 자가 점검
2. 관리요령 및 보관방법
3. A/S 신청 전 확인
4. 리모콘 에러 메시지
5. 제품 사양
6. 제품 보증서



1. 자가 점검

사용 전 점검사항

1. 전원코드가 콘센트와 연결되어 있나요?
2. 본체의 전원 스위치가 '켜짐' 상태인지 확인하셨나요?
3. 리모콘 전원 ON시 LCD가 켜지나요?
4. 도자의 온도가 적정 사용온도인지 확인하셨나요?
5. 외부도자가 외관 상 이상한 점이 있나요?
6. 도자밴드에 손상이 없는지 확인하셨나요?

사용 후 점검사항

1. 리모콘 전원 OFF시 LCD가 꺼지나요?
2. 본체의 전원 스위치가 '꺼짐' 상태인지 확인하셨나요?
3. 전원코드가 콘센트와 연결이 해제되어 있나요?



2. 관리요령 및 보관방법

1. 레자는 석유계 제품이기 때문에 아세톤, 볼펜, 휘발유, 신나, 땀, 무스, 스프레이 등 유기성 용제에 치명적이지 않도록 주의하세요.

2. 평소에 사람의 피부나 머리가 직접 닿는 부위는 깨끗한 마른 헝겊으로 닦아주세요.

3. 화장품 종류, 휘발성 유제와의 접촉 시 장시간 경과 후 표면이 벗겨질 수 있으니 신속히 마른 헝겊으로 닦아주세요.

4. 걸친 세탁 시 중성세제를 사용하여 단독 손세탁을 해 주세요.

5. 뜨거운 것이나 화기를 접할 경우 레자가 오그라드는 성질이 있으므로 각별히 주의해 주세요.

6. 직사광선과 습한 곳은 피해주세요.
(제품의 탈색 및 노후의 원인이 됩니다.)

7. 실온에서 보관 하세요.



3. A/S 신청 전 확인

리모콘이 켜지지 않나요?

- Q : 제품 하단의 전원스위치가 켜져 있나요? A : 전원 스위치를 켜주시기 바랍니다.
- Q : 전원코드가 제대로 연결되었나요? A : 전원코드를 다시 연결하여 주시기 바랍니다.
- Q : 리모콘이 제대로 연결되었나요? A : 리모콘을 다시 연결하여 주시기 바랍니다.

외부도자가 작동되지 않나요?

- Q : 외부도자가 제대로 연결되었나요? A : 외부도자를 다시 연결하여 주시기 바랍니다.

제품동작에 이상이 있나요?

- Q : 상하키로 내부도자가 이동하지 않나요? A : 반자동모드, 수동모드에서만 상하키를 이용한 내부도자 이동이 가능합니다
- Q : 리모콘의 일부키가 입력되지 않나요? A : 보조매트의 상태를 확인해 주시기 바랍니다. 보조매트가 완전히 열리지 않은 경우 리모콘의 일부 키가 입력되지 않습니다.
- Q : 리모콘의 사운드키가 입력되지 않나요? A : SD카드의 상태를 확인해 주시기 바랍니다. SD카드가 정상적으로 장착되지 않은 경우 리모콘의 사운드 키가 입력되지 않습니다.
- Q : 음악이 들리지 않나요? A : SD카드의 상태를 확인해 주시기 바랍니다.
A : 제품의 전원을 껐다 켜주시기 바랍니다.

리모콘 화면에 에러 메시지가 표시되나요?

- Q : 리모콘 화면에 tH, SE, HE, PH, Hod, HEE, HLE, CE, Vod, VEE가 표시되나요? A : 에러 메시지를 확인 후 고객센터로 연락 주시기 바랍니다. 절대로 온열기를 임의로 분해해서는 안됩니다.



4. 리모콘 에러 메시지

작동 중 오류가 생기면 리모콘 화면에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

표 시	의 미	에러발생 위치
tH	고온불량	내부도자 외부도자 본체발열체 보조발열체
SE	온도센서 불량	내부도자 본체발열체 보조발열체
HE	발열체 불량	내부도자 외부도자
PH	고온불량	내부회로
Hod	수평모터 과부하 불량	수평모터 구동부
HEE	수평모터 엔코더 불량	
HLE	수평 리미트 스위치 불량	
Vod	수직모터 과부하 불량	수직모터 구동부
VEE	수직모터 엔코더 불량	
CE	통신라인 불량	본체와 리모콘 연결부 본체 내부 연결부



주의

에러 메시지가 표시되면 확인 후 고객센터로 연락주시기 바랍니다.



5. 제품 사양

모델명	CGM MB-1101
제품명	개인용온열기
정격전압	AC220V, 50/60Hz
소비전력	360VA
사용환경 온도	10°C~40°C
SD카드 용량	2GB
SD카드 포맷방식	FAT32
SD카드 최대인식 파일 수	100개
재생 가능파일 형식	MP3
MP3 최대출력	2.2W
제품치수	펼쳤을 시: 700mm×2016mm×450mm(±5mm) 접었을 시: 700mm×1258mm×450mm(±5mm)
제품중량 (구성품 미포함)	본체: 23kg(±2kg) 보조매트: 14kg(±2kg) 프레임: 16kg(±2kg)
사용목적	근육통완화
제조원	주식회사 세라젬

* 이 제품은 의료기기입니다.

* 품질 향상을 위해 디자인 및 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제품은 국내 판매용으로 제작되어진 제품입니다. 따라서 본 제품을 해외로 반출 시에는 어떠한 사후관리도 받을 수 없음을 양지하시기 바랍니다.

* 타 SD카드의 경우 제품에 정상적으로 인식이 되지 않을 수 있습니다.



6. 제품 보증서

보증서

- * 세라젬은 소비자보호법의 규정에 의하여 제품에 대한 보증을 제공합니다.
- * 세라젬의 승인을 받은 제품을 구입할 경우 보증 기간 1년동안 정상적인 사용에서 발생된 부품의 수리서비스는 무료로 제공됩니다.
- * 이 보증서는 제품을 구매한 나라에 한해 유효합니다.
- * 제품 고장 발생 시 고객센터로 연락하시기 바랍니다.
- * 본 제품의 부품 보유 연한은 제품 단종 후 3년입니다. MOTOR, PCB, 도자 이동부(내부도자)등 중요 부품은 제품 단종 후 5년간 유효합니다.

제품명		고객명	
모델명		주소 1	
시리얼넘버		주소 2	
보증기간	구입일로부터 1년	소재지	
구입일자		우편번호	
구입처		전화번호	

(제품 구입시 구입처 란을 작성하시어 확인을 받으셔야 향후 무상수리를 받으실 수 있습니다.)

무료서비스

구입 후 1년 이내에 정상적인 사용에서 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받으실 수 있습니다. 영업용이나 사용이 빈번한 곳에서 사용시 보증기간을 단축할 수가 있습니다.

유료서비스

신속한 서비스와 고객 만족을 위해 서비스를 요청하시기 전 아래의 문제점들을 검토해 주시기 바랍니다. 아래의 서비스에 대하여 출장비 및 자재비용이 부과되오니 다시 한번 검토해 주시기 바랍니다.

- 제품 전원(AC220V)이 아닌 전원에 연결했을 경우
- 전원을 올바르게 연결하지 않았을 경우
- 소비자의 설치 및 사용 미숙으로 인한 경우
- 소모성 부품(속천,결천,도자밴드 등)의 수명이 다한 경우
- 사용자의 과실로 인해 고장이 발생할 경우
- 천재지변(홍수, 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 전쟁 등)으로 인해 고장이 발생한 경우
- 적절하지 않은 환경에서 사용에 의해 이상이 발생한 경우

주의사항

- 다음과 같은 제품의 고장 및 파손은 고객의 책임입니다.
- 공인되지 않은 기술자가 제품을 수리하여 고장 발생 시
 - 소비자 임의로 수리 및 개조하여 고장 발생 시
 - 제품의 오용이나 악용 및 부주의로 인한 제품 파손 및 고장의 경우

보증조건

이 보증서는 제품을 구입하거나 계약을 한 순간부터 적용됩니다.
이 보증서는 구매 당사자에게만 유효하며, 그 후 최초 구매자로부터 제품을 양도받은 자는 보증을 받을 수 없습니다.
세라젬이 발급하지 않은 다른 보증서, 즉 다른 사람이 추가로 발급한 보증서나 유효기간이 만료된 보증서는 보증 사항에서 제외됩니다.

주식회사 세라젬

충남 천안시 서북구 성거읍 오색당리 177-14 | TEL : 041-523-2550 | FAX : 041-523-2560
고객센터 : 1577-5570 | 홈페이지: <http://www.ceragem.co.kr>



본사/공장

충남 천안시 서북구 성거읍 오색당리 177-14

TEL : 041-523-2550

FAX : 041-523-2560

고객센터

TEL : 1577-5570

홈페이지

<http://www.ceragem.co.kr>